

MONKEYPOX

Diagnóstico Molecular

Tome el control,
control molecular

AMPLIRUN® TOTAL MONKEYPOX VIRUS CONTROL (SWAB)

CONTROLES DE EXTRACCIÓN Y AMPLIFICACIÓN PARA ENSAYOS MOLECULARES

- Patógeno completo inactivado - contiene todo el genoma y es compatible con cualquier análisis.
- Control total en una matriz que imita una muestra humana - para monitorizar todo el proceso: extracción, amplificación y detección.
- Cuantificado, positivo bajo - preparado para producir resultados a una concentración clínica significativa.
- Formato monodosis y presentación liofilizada - garantiza la estabilidad y evita la manipulación y los costes de transporte adicionales.
- Material no infeccioso con certificado de inactivación.
- Compatibilidad con múltiples plataformas.



RUO

 **VIRCELL**
Molecular

AMPLIRUN® TOTAL MONKEYPOX VIRUS CONTROL (SWAB)

Ref. MBTC032-R

Virus de la viruela de mono (Monkeypox virus) inactivado y formulado en medio de transporte viral. Producto destinado a validar y controlar el procesamiento de muestras, la amplificación y la detección de ácido nucleico como control de ejecución externo.

CONTENIDO

10 viales con Monkeypox virus liofilizado (10.000-25.000 copias/vial).

- La concentración de cada lote se proporciona en el certificado de análisis.
- La cuantificación se realiza por PCR en tiempo real.
- Volumen de reconstitución: 500 µl.

ORIGEN

A partir de partículas virales purificadas obtenidas en células VERO E6. Los virus se inactivan, lo que los hace no infecciosos, y se diluyen en medio de transporte que contiene células epiteliales humanas.

Secuencia completa disponible en www.vircell.com


CONSERVACIÓN Y VIDA ÚTIL

No se requieren condiciones especiales de transporte. Los viales deben mantenerse liofilizados a 2-8°C. Después de la reconstitución, la suspensión debe usarse el mismo día. El producto no utilizado debe desecharse.

Los controles AMPLIRUN® TOTAL tienen una vida útil de 30 meses a partir de la fecha de fabricación.

INFORMACIÓN Y PRODUCTOS RELACIONADOS

Descripción	Referencia	Contenido
AMPLIRUN® TOTAL MONKEYPOX VIRUS CONTROL (SWAB) NUEVO	MBTC032-R	10 viales
AMPLIRUN® MONKEYPOX VIRUS DNA CONTROL NUEVO	MBC146-R	10.000-20.000 copias/µl
MONKEYPOX REALTIME PCR KIT NUEVO	RTPCR018-LPD-R	96 tests

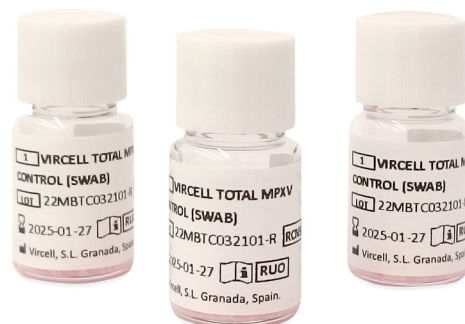

El uso de **AMPLIRUN® TOTAL** ayudará a su laboratorio a:

- **Mejorar la calidad de todo el proceso de la prueba:** extracción, amplificación y detección.
- **Monitorizar el desempeño del instrumento** a largo plazo obteniendo resultados comparables.
- **Validar y verificar nuevos ensayos.**
- **Hacer seguimiento de las variaciones en los procedimientos de laboratorio,** incluidos nuevos lotes de reactivos.
- **Cumplir con los requisitos de acreditación del laboratorio.**